

Orion[®] Metro



**A combinação perfeita de conforto,
segurança e fiabilidade**



Orion METRO

Quer apreciar uma viagem rápida para ir ao encontro dos amigos para almoço ou uma curta viagem ao mercado local, a **Orion METRO** é a escolha ideal.

A nova **Orion METRO** desenhada de forma ergonómica foi desenvolvida desde o início para se focar em aspetos chave, importantes tanto para novos utilizadores como para utilizadores sazonais. Como resultado, ela está equipada com uma variedade de características que asseguram aos utilizadores uma viagem segura, fácil e agradável.

A **Orion METRO** é a combinação perfeita de conforto, segurança e fiabilidade!



Condução controlada e robusta

O sistema de suspensão na compacta **Orion METRO** foi desenvolvido para que possa conduzir diariamente em vários tipos de pisos e terrenos, permitindo que relaxe e desfrute de uma viagem controlada com conforto. O seu motor poderoso combinado com rodas pneumáticas de 11" vão levá-lo de forma suave e segura por entre os obstáculos ou terrenos irregulares.

Segurança

Adicionalmente ao sistema de luzes único, a **Orion METRO** é equipada com um sistema eletrónico de redução de velocidade que reduz automaticamente a velocidade nas curvas, garantindo sempre segurança e manobras confortáveis. Além disso, a alavanca de bloqueio duplo previne que a scooter se desengate acidentalmente. Estas características em combinação com os testes realizados no laboratório Alemão TÜV, garantem segurança desde o início com a Invacare **Orion METRO**.

Simplicidade e facilidade de manutenção

Os componentes de qualidade tornam a **Orion METRO** numa scooter não só fiável mas também de fácil manutenção. Basta retirar a parte superior da proteção para aceder às baterias, parte eletrónica, motor e cabos.

A parte eletrónica e o motor estão protegidos contra a corrosão e água de forma a evitar avarias desnecessárias.



Características e opções



Adaptador USB

Perfeito para carregar o telefone ou tablet em viagem - basta ligar e seguir!



Suporte de copo rebatível

Ideal para transportar copos ou garrafas, o suporte pode ser rebatido quando não está em uso.



Regulação da coluna de direção

O utilizador pode ajustar a coluna de direção às suas necessidades.



Volante ergonómico

O tamanho, curvatura e material do volante garantem conforto e estabilização na condução.



Travão de mão

Garante uma travagem imediata se necessário.



Luz de travagem

Clara e brilhante, avisa quando a scooter abranda.




Alavanca de bloqueio duplo

Previne que a scooter se desengate acidentalmente.



Redução automática da velocidade

Reduz a velocidade nas curvas para uma segurança adicional.

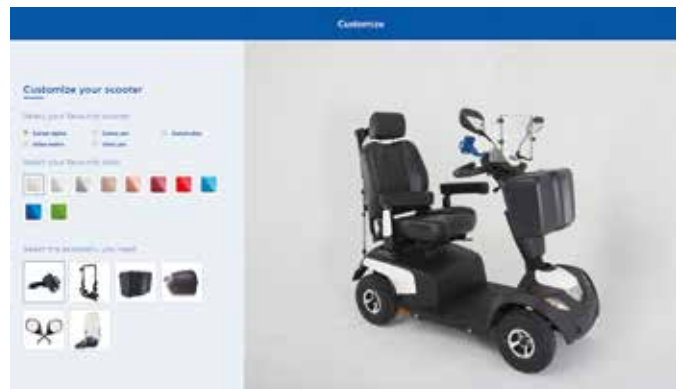












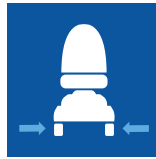


Personalize a sua scooter com carenagens coloridas e acessórios




Escolha a partir de 10 cores de carenagens e mais de 25 acessórios para personalizar a scooter ao seu estilo. Para saber mais visite o nosso microsite em: www.invacarescooter.com.

Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Largura do encosto	Profundidade de assento	Altura assento-chão	Altura do encosto	Largura total	Comprimento total	Peso
							
Orion Metro	510 mm	470 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	490 mm	660 mm	1270 mm	110 kg

	Parte mais pesada	Peso max. utilizador	Capacidade da bateria	Diâmetro de viragem	Altura max. ultrapassar obstáculos	Distância do solo	Max. inclinação
							
Orion Metro	57 kg	136 kg	2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM	260 0mm	80 mm	78 mm	10°

	Autonomia	Velocidade máxima	Capacidade do motor	
			1. Pico de performance	
Orion Metro	54 km	10 km/h	240 W / 600 W ¹	

Cor das carenagens

Branco mármore	Azul alium	Verde Jade	Beige	Bronze
				
Vermelho carmim	Cromado	Prateado	Azul elétrico	Vermelho
				

Estofa

Preto vinil
