

IDENTIFICAÇÃO

Divã Marquesa Hidráulica Simples

REFERENCIAS

10.DV.1684 - 10.DV.1684.1 - 10.DV.1684.2
10.DV.1686 - 10.DV.1686.2-

FIM A QUE SE DESTINA

Estrutura hidráulica bipartida manual destinada aos seres humanos para diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência.

Dispositivo Médico Não Ativo Classe I. - DL 145/2009 que transpõe a Diretiva nº 2007/47/CE. (MDD 93/42/EEC).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

. Estrutura em tubos de aço E220 retangular 60x40x3mm; 40x20x2mm; 45x25x1,5mm; quadrado 40x1,5mm; 25x1,5mm; redondo Ø20x2; Ø16x2mm; algumas barras e varões, soldada a Mig – Tig por processo manual.

. Desengorduramento e fosfatação da superfície e pintura a epoxy.

. Ref.ª 10.DV.1684/.1/6 - Leito bipartido de espuma flexível de poliuretano revestida a napa composta por malha de poliéster e algodão revestida a PVC. (Dimensões: 1930x680x50mm).

. Ref.ª 10.DV.1684.2/6.2 - Leito bipartido de espuma flexível de poliuretano revestida a napa composta por malha de poliéster e algodão revestida a PVC. (Dimensões: 2200x705x80mm).

. Cabeceira acionada por sistema de mola a gás, com abertura facial (Ref.ª 10.DV.1684/.1/2).

. Base com 4 rodas, sistema de bloqueio e 1 pé nivelador.

. Altura regulável através de hidráulico acionado **por pedal de ambos os lados** (Ref.ª 10.DV.1684.1/2/6.2).

ACESSÓRIOS:

. Suporte para rolo de papel de 500mm Ref.ª 10.DV.1699.1

. Par de Guardas Laterais inox Ref.ª 10.DV.1688

. ou Par de Guardas Laterais pintadas. Ref.ª 10.DV.1689

DIMENSÕES: (comp. x larg. x altura regulável).

10.DV.1684/6 - 1930x680x580 a 870mm - 10.DV.1684.1 - 1930x680x580 a 840mm

10.DV.1684.2/6.2 - 2200x705x605 a 865mm

PESO:

10.DV.1684 - **65 Kg** - 10.DV.1684.1/6 - **67,3 Kg** - 10.DV.1684.2/6.2 - **64 Kg**

Cor standard: Estrutura cinza e napa preta (outras cores conforme catálogo)

SEGURANÇA

. Sempre que for necessário movimentar/posicionar o paciente é conveniente travar a marquesa com o sistema de bloqueio a fim de evitar deslocamentos não previstos que coloquem em perigo o paciente ou o utilizador. Não serve para transportar o paciente.

. Não deve ser usado por mais que 1 pessoa ao mesmo tempo e com peso superior a 170 kg.

. Quando o hidráulico for acionado deve-se ter em atenção o perigo de esmagamento nas articulações assim como na articulação da cabeceira.

. Não aproximar fontes abrasivas ou de calor porque possui matérias passíveis de se inflamarem.

. Antes de utilizar um produto JMS não deixe de consultar o Manual de Utilizador.

. Uma boa utilização do produto previne acidentes e prolonga o seu tempo de vida.

ARMAZENAMENTO/CONSERVAÇÃO

. O diva marquesa é embalado em cartão e/ou filme. Deve ser armazenado em locais com temperatura e humidade controlada (temperatura abaixo dos 25°C, humidade inferior a 60%), de forma a não danificar a embalagem nem o produto.

. O seu transporte/movimentação enquanto embalado, deve ser feito por pelo menos 2 pessoas.

. Deve ser armazenado em locais que garantam proteção contra quedas, na posição horizontal com estofa para cima e dentro da embalagem, não devendo ser empilhados.

. Nas operações de limpeza não usar detergentes, soluções com álcool nem materiais que possam danificar o produto, use apenas agua morna com sabão e seque o diva ou marquesa.

. Para melhor conservação e limpeza do estofa deve consultar o Manual de Utilizador.

QUALIDADE


. Todos os nossos produtos são concebidos a partir de matérias-primas e subsidiárias rigorosamente controladas na receção sendo incorporadas no processo de fabrico definido segundo procedimentos internos no âmbito do sistema de gestão da qualidade implementado NP EN ISO 9001.

. Os produtos JMS possuem garantia. Consulte o Certificado de Garantia em vigor na empresa.





10.DV.1684



10.DV.1684.2

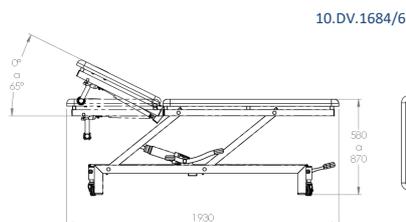


10.DV.1684/6

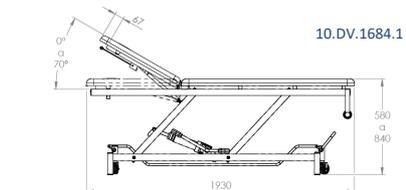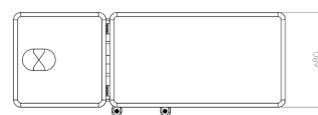

10.DV.1684.1

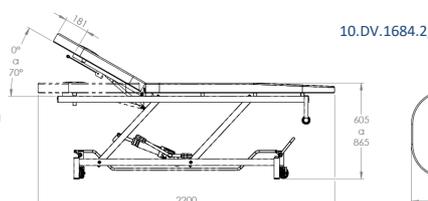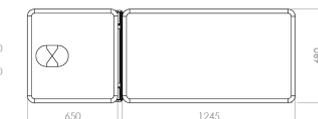

10.DV.1684.2/6.2

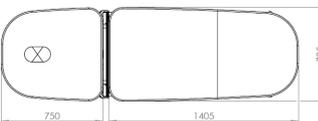

Para outras informações contacte a JMS



JMS - Industria de Mobiliário Hospitalar, S.A.

Zona Industrial do Bunheiro - Rua da Zona Industrial, n.º26 - Apartado 19 - 3871-909 MURTOSA

T +351 234 880 018 | F +351 234 880 017

geral@jmshospitalar.com

www.jmshospitalar.com